

# Fiche Technique

Masque Chirurgical Type IIR

Réf. interne : LM2504



# Fiche Produit

## Masque Chirurgical Type IIR

Référence : LM2504



Norme : EN14683+AC:2019 IIR, relative au règlement (EU) 2017/745/UE



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

#### Masques chirurgicaux Type IIR à usage unique, non stériles

Masque destiné à empêcher les germes présents dans les voies respiratoires de sortir et de contaminer l'entourage. Permet de limiter la transmission des virus aéroportés par les personnes infectées. Ce masque est résistant à la projection pour réduire l'exposition potentielle du porteur au sang et aux liquides corporels. Ce masque est adapté au milieu hospitalier, pour un usage médical.



### CONFORMITÉ DU PRODUIT

#### Masques conformes aux dispositions réglementaires suivantes :

- Norme harmonisée **EN 14683+AC : 2019 (Type IIR)** qui évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration.
- Règlement UE **2017/745/UE**.
- Marquage **CE**.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Masques non stériles à USAGE UNIQUE

**Efficacité de filtration bactérienne** : BFE  $\geq$  98 %

**Réspirabilité** :  $< 60$  pa/cm<sup>2</sup>

**Bioburden** :  $< 30$  Cfu/G

**Couches** : 3

**Durée de vie** : 5 ans


**Utilisation unique** : efficace 4h

**Dimensions du masque** : 9.5 x 17.5cm

### COMPOSITION DU MASQUE

- 35% couche de PP non-tissé,
- 30% couche de PP non-tissé soufflé par fusion,
- 35% couche de PP non-tissé.
- Une barette nasale pour une meilleure étanchéité
- Une couche interne et externe ultra déperlante
- Avec élastiques
- Sans latex

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

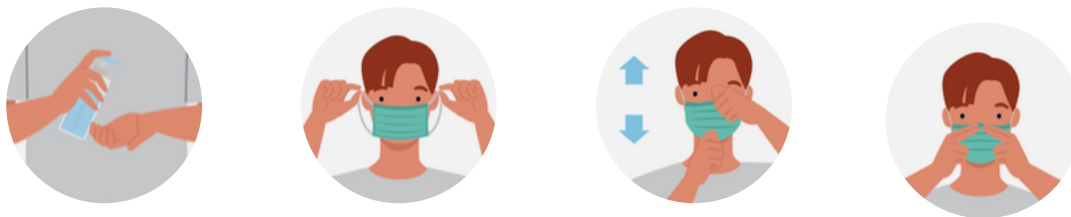

- Tirez et déployez le masque à deux mains pour vous assurer que le pince-nez est vers le haut.
- Tenez le masque sur le visage et tirez la bande élastique jusqu'aux oreilles.
- Appuyez sur le clip du nez pour épouser la forme du nez.
- Durée de vie : 4h. Ne pas réutiliser.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

**LIMITES D'UTILISATION** : Dispositif à usage unique. Utiliser 2 à 3 masques par jour par personne.

**STOCKAGE** : Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité entre 10 et 25°C.

**AVERTISSEMENT** : Il est essentiel que le masque soit enlevé en dernier, après tout autre matériel de protection (gants, surblouse, lunettes de protection) afin de limiter au maximum tout risque de contamination. Les mains doivent impérativement être désinfectées après le retrait du masque.

